

## Transportanvisning för prov med misstänkt Viral Hemorragisk Feber

Kontakta alltid Folkhälsomyndigheten före provtagning och transport  
Tel. 010-205 24 00 (knappval görs för Klinisk mikrobiologi i beredskap)


### Beställ transport

- Ring World Courier (Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal)  
Telefonnummer: 031 40 77 77  
Ange kundnummer: STO16712, ansvarskod 471400 samt ansvarig person.
- Beställ transport till Folkhälsomyndigheten, Tomtebodavägen 12B i Solna.  
Uppge att det gäller transport av UN 2814.

### Packa provet

**OBS!** Både provrör och sekundärförpackning (grön burk) ska märkas med PatientID

- Provrören placeras i transporthylsa med absorbent i den gröna burken innehållande absorbent
- Burken stoppas i kartong med förmärkta etiketter och farosymboler för transport av farligt gods UN2814
- Ifylld remiss för speciell diagnostik från Folkhälsomyndigheten läggs i kartongen, utanför den gröna burken.

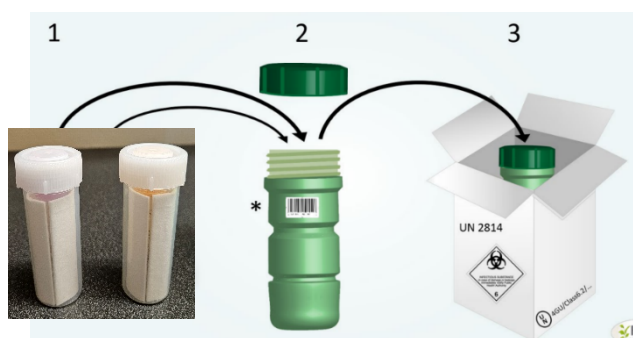

### Godsdeklaration

*Bild justerad från FoHM Packa provet rätt*

- Fyll i deklARATIONEN enligt mall, ta kopia (som behålls på avd)
- Godsdeklarationen lämnas till föraren tillsammans med kartongen

**Kontakta Folkhälsomyndigheten och säg att provet är på väg.**