



Vårdarmanövrerade elektriska rullstolar

Hjälpmedelscentralen, Jönköping
22/9 2020





Vårdarmanövrerade elektriska rullstolar

9.00 - 9.15

Presentation

9.15 - 9.30

Fika

9.30 -10.15

Teori; regelverk
och rutiner

10.15-11.50


Sortiment, skruva
och provkörning

11.50-12.00

Summering och
utvärdering



Förskrivningsprocessen

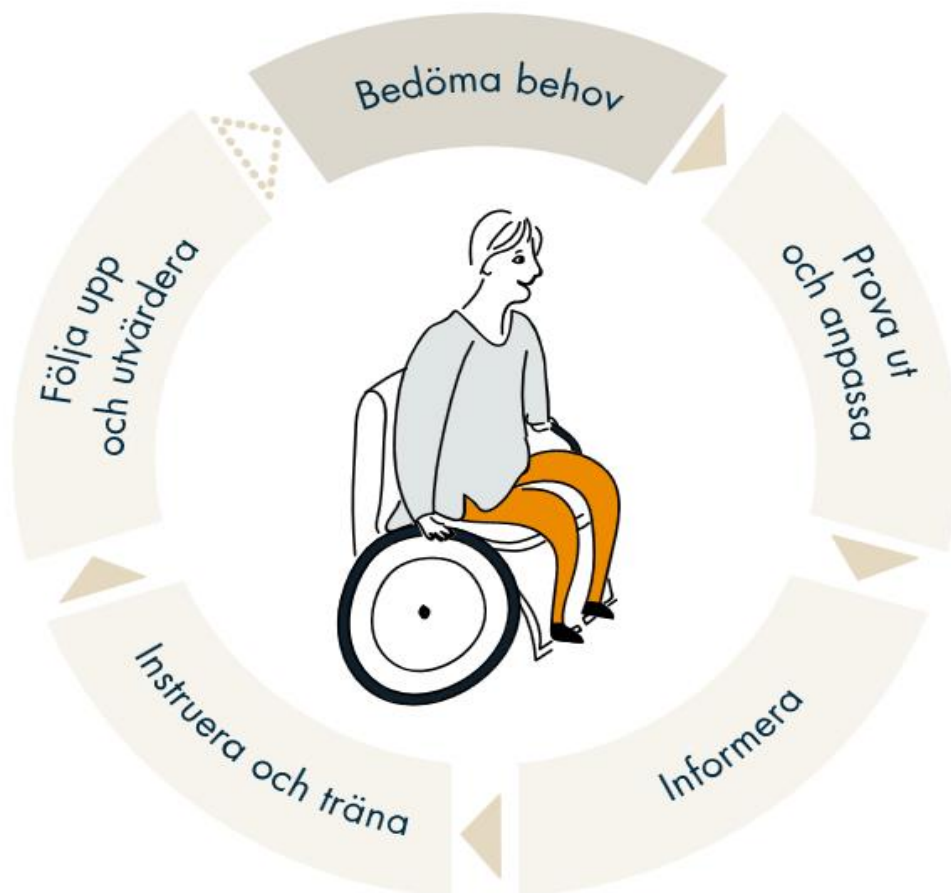

- Hur ofta?
- Vem ska köra?
- Hur långa promenader?
- Hur ska stolen köras?
- I vilken miljö?
- Behov av sittanpassning?
- Färd i bil/transporter?

Vad säger Regelverket?

Vårdarmanövrerade elektriska rullstolar och drivaggregat

För vem:

- Om närstående/vårdare inte klarar att köra den manuella rullstolen på grund av personens vikt, rullstolens utformning eller närmiljön.



Vad säger Regelverket?

Vårdarmanövrerade elektriska rullstolar och drivaggregat

Mål:

Att göra det möjligt att komma ut regelbundet i sin närmiljö med hjälp av närstående/vårdare

Frekvens:

minst två gånger i veckan under hela året

Förskrivare:

Arbetsterapeut

Vad säger Regelverket ?

Vårdarmanövrerade elektriska rullstolar och drivaggregat

Antal:

En elektrisk vårdarmanövrerad rullstol kan förskrivas.

Uppföljning:

Regelbunden uppföljning 1-2 ggr/år. Vid förstagångsförskrivning ska uppföljning ske inom 6 månader. Uppföljning av användnings frekvens samt måluppfyllelse.

Rutiner vid förskrivning av vårdarstyrd elektrisk rullstol och drivaggregat

- Behovsbedömning och målformulering-använd remissunderlaget som checklista
- Val av modell efter behov
- Beslutsstöd
- Låneförbindelse via Websesam
- Körträning i hemmiljö- körträningsrapport som stöd
- Uppföljning

HMC vill inte ha in några papper, egen utprovning

Utprovning



- Vem deltar: Patient, arbetsterapeut samt ansvarig "förare"
- Var: i miljön där stolen ska köras
- Prova in sittandet med patienten
- Överenskommelse om hur inträning ska ske – Utse kontaktperson i personalgrupp?
- Körträningsrapport från hemsidan
- Låneförbindelse från webbesam
- Information; bruksanvisning, skötsel

Klasser av elrullstolar

Elrullstol för inomhusbruk: A-klass

Lutning 3°/6°, nivåskillnad 15 mm, frigång 10 mm, räckvidd 15 km

Elrullstol för inne-utebruk: B-klass

Lutning 6°/9°, nivåskillnad 50 mm, frigång 30 mm, räckvidd 25 km

Elrullstol för utomhusbruk: C-klass

Lutning 10°/15°, nivåskillnad 100 mm, frigång 50 mm, räckvidd 35 km

Vårdarmanövrerad rullstol med drivaggregat för utomhusanvändning.

Cross med Lille Viking 2000



Anpassat sittande:
Azalea med Lille Viking 2015, flat bow



Vårdarmanövrerad elektrisk rullstol för utomhusanvändning.

Kite med vårdarstyrning
Compact Clever
Ichair



Kite med vårdarstyrning

Induktiv styrning

Ställ in efter patientens mått

Sittdjup

Sittbredd

Armstödshöjd

Benstödslängd

Passar dynan de nya måtten?



Compakt Clever Ichair

Z-styrning

Ställ in efter patientens mått

Sittdjup

Sittbredd

Armstödshöjd

Benstödslängd

Passar dynan de nya måtten?





Vårdarmanövrerad elektrisk rullstol

- + Går långt
- + Stabil stol
- + Lättare att ut steget
- + Tuffare miljö
- Ej anpassat sittande
- Tyngre stol

Klass B

Vårdarmanövrerad manuell rullstol med drivaggregat



- + Tar mindre plats
- + Går/rullar bäst på hårdgjord väg
- + Lätt att köra frikopplad
- + Anpassat sittande
- + Endast en stol (-?)

Klass B

Tänk på att de olika fabrikaten har olika styrningar



Eget ansvar för samtliga elektriska rullstolar:

- Anhörig/personal ansvarar för normalt underhåll.
- Laddning
- Förvaring, försäkring
- Tillbehör, korg och käpphållare är egenansvarsprodukter och kostar 200 kr/st. Produkterna kan vara begagnade.
- Ta med rullstolen i bil

Patientfall



Körträning och uppföljning



Körträning med ansvarig förare/vårdare
Träna i miljön där stolen ska användas.

Träna med annan än patienten först!

Körträningen är en säkerhet för både förskrivare, patient och anhörig/personal.

Om körträningen inte fungerar-avbryt utprovningen!

Årlig uppföljning 1-2 ggr/år

Laddning och skötsel

- Laddningsrutin, vad mår batteriet bra av ?
- Rengöring



(Soldriven elrullstol)

Vad gör man när stolen inte går ?

- Är stolen laddad ?
- Är stolen frikopplad ?
- Sitter sladdarna i ?
- Har automatsäkring löst ut ?
- Är stolen låst ?
- Är laddkabeln i ?
- Kolla instruktionsboken
- Kontakta tekniker på Hjälpmedelscentralen



Elrullstol i bil



- Flytta över till bilsäte är alltid säkrast!
- Vårdarstyrda elrullstolar får man sitta kvar i, med nackstöd och ev bälte. Kolla bruksanvisning för specifik stol
- Vårdarstyrda manuella rullstolar, följ rullstolens bruksanvisning för hur stolen ska vara utrustad, hur man förankrar drivaggregatet i bilen står i drivaggregatets bruksanvisning
- Färdtjänstens chaufförer har inte ansvar för att köra elrullstolar in och ut ur bilarna

Tack för oss!

Lena Andrén [lena.andren@rjl.se](mailto:lana.andren@rjl.se) 010-242 87 22

Lena Andersson lena.k.andersson@rjl.se 010-242 85 16

Tekniker Jens Wahlberg var med vid utbildningen.

Tekniker: 010-242 87 00, knappval 2

